

※素肌が見えないよう「三角巾」をお使いください。

女性に配慮したAEDの使い方

【監修】公益財団法人 日本AED財団

【出展】東京都多摩府中保健所

パッドを

素肌に直接貼り付ける



ことができている場合は、ブラジャーを外す必要はありません。

服の下で下着をずらして、右の鎖骨の下と左のわき腹のあたりに貼ることで対応できます。

金属製品（ブラジャーのワイヤー部分、ネックレス等）は**パッドに触れさせない**ようにしてください。

パッドに触れていなければ、ネックレスは無理に取り外す必要はありません。

AEDのパッドに描かれているイラストをご参照ください。

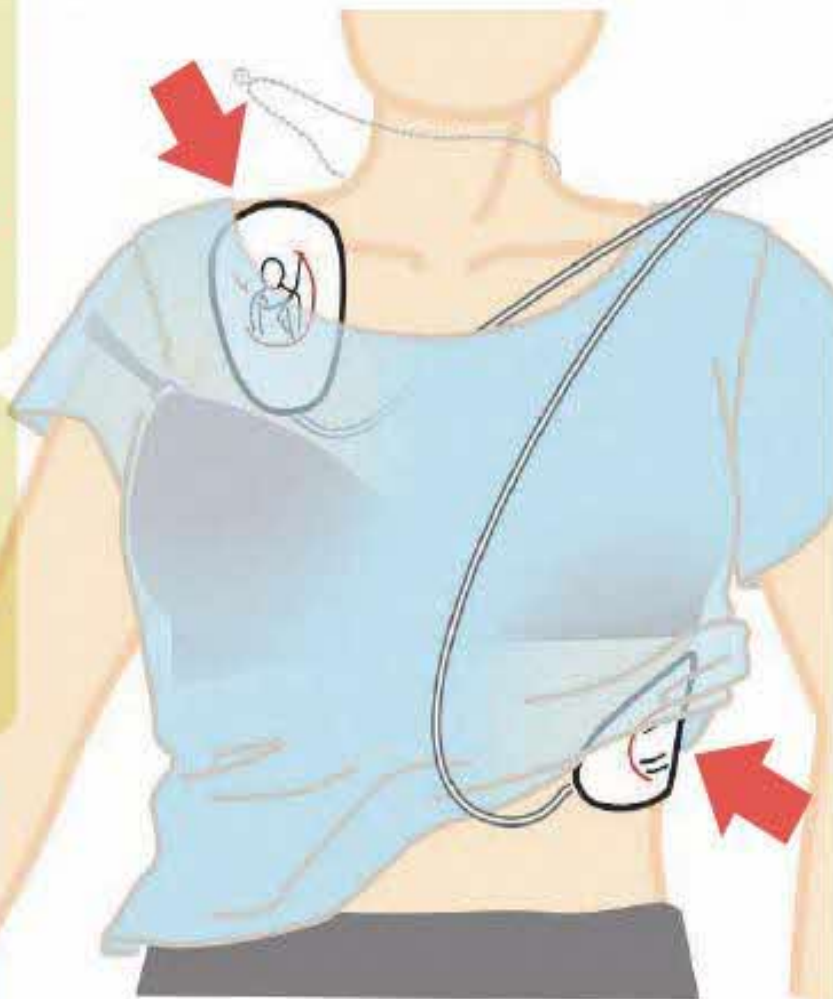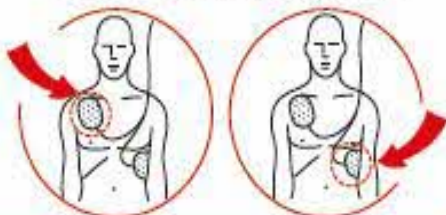

パッドを貼った後に
上から上着やタオルなどを
かけても大丈夫です。

その他の注意事項

- * 汗などで胸が濡れている場合は、水分を拭き取ってください。
- * 電極パッドを貼る部分に貼り薬（湿布等）が貼られている場合は、貼り薬を剥がしてください。
- * ペースメーカー等が植え込まれている場合（胸に硬いこぶのようなでっぱりが見える）は、このでっぱりを避けて電極パッドを貼ってください。
- * 車内など、揺れている場所では使用しないでください。

荒尾市役所 防災安全課
【問合せ先】 ☎63-1395